



ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ  
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

Специальная коляска YETI создана для детей старшего возраста весом до 80 кг и ростом до 175 см. Имеет прочную конструкцию и широкий диапазон регулировок. Система Я РАСТУ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ позволяет подогнать габариты коляски под рост ребенка, благодаря чему она прослужит вам долгие годы.

Угловая регулировка сиденья и спинки позволяет отрегулировать оптимальное положение коляски под потребности ребенка. Кроме того, множество практичных аксессуаров и механизм быстрого складывания значительно упрощают повседневное использование.

Подвеска YETI с гелевыми колесами, центральным тормозом, амортизацией задних колес, регулируемой опорой и фиксатором направления гарантирует легкую и плавную езду. Дополнительным преимуществом коляски является ее современный и практичный дизайн.

#### ПОКАЗАНИЯ:

параличи и парезы нижних конечностей различного происхождения, параличи и парезы туловища, слабость постуральных мышц, отвечающих за поддержание правильного положения тела, чаще всего вызванные такими состояниями, как церебральный паралич или менингеальная грыжа.



## ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ.



#### ОБИВКА

синтетическая



#### РАМА

лакированная / матовая



# функции. *безопасности и комфорта*

## ФУНКЦИЯ КОЛЫБЕЛИ

*легкая посадка*



9,5°-29°

5 позиций

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

*широкий спектр*



3°- 99°

8 позиций

## РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

*быстро и легко*



80°- 180°

6 позиций

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

*набор вставок*



Комплект сужения сиденья состоит из четырех независимых вставок на липучке. Благодаря возможности установки на любой высоте и под любым углом, мы можем обеспечить ребенку оптимальное положение в коляске и комфортное путешествие.

## Я РАСТУ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ

*настройка параметров*



Преимуществом коляски YETI является система Я РАСТУ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ. Возможность регулировки глубины сиденья до 45см, высоты спинки до 85см и возможность опускания подножки на 43,5см ниже уровня сиденья значительно увеличивает диапазон регулировок, а значит, коляска может использоваться долгие годы.

## ЛЕЖАЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

*возможности регулировок*



Благодаря возможности регулировки угла наклона сиденья, спинки и подставки для ног можно установить коляску в лежачем положении. Благодаря этому короткий сон возможен практически в любом месте и ситуации.



## ШТОРКИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ВЕТРА

многофункциональная обивка



У YETI есть возможность регулировать боковые противоветровые шторки, которые обеспечивают дополнительную защиту в неблагоприятную погоду.

## СКЛАДНАЯ РАМА

легкая транспортировка



Конструкция рамы тележки позволяет быстро складывать ее для подготовки к транспортировке или хранению.

## ПОДДЕРЖКА ВОЖДЕНИЯ

комплексная ходовая часть



Коляска YETI имеет множество функций вождения, таких как блокировка направления на передних колесах, центральный тормоз, амортизация задних колес и регулируемая ножка.

# функциональные аксессуары.



регулируемый капюшон с окном



пятиточечные ремни



подголовник

набор регулируемых сужающих вставок



ремни для удержания и стабилизации



клин



блокировка направления

удобная система крепления колес




# аксессуары. *большой выбор*



набор регулируемых сужающих вставок



подголовник

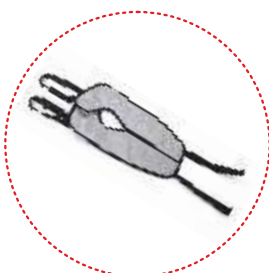

ремни для удержания и стабилизации



клин



регулируемый козырек



барьерка безопасности



корзина для покупок



туристическая сумка



зонт



зимние перчатки



терапевтический столик



спальный мешок



москитная сетка



дождевик

## параметры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ



ширина сиденья 28 \* / 43 см



глубина сиденья 31 - 45 см



высота спинки 65 - 85 см



регулировка подножки 28,5-43,5 см



в сложенном виде: Д 110 х Ш 66 х В 50 см



вес коляски 24-28,6 кг



длина коляски 114,5-146 см



высота коляски 117-138 см



ширина коляски 66 см

### ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



высота 130-175 см



максимальный вес 80 кг

\* с сужающими вставками