

mouse



ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ  
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

Специальная инвалидная коляска MOUSE предназначена для самых маленьких детей, которые не могут ходить или сидеть в правильном положении из-за травмы или другого заболевания. MOUSE подходит для детей ростом от 80 до 110 см и весом до 30 кг.

Благодаря регулируемым боковинам по высоте головы и туловища можно оптимизировать положение ребенка в коляске, обеспечивая его устойчивость и безопасность. Кроме того, регулировка сиденья (функция люльки) и спинки позволяет регулировать положение коляски под нужды ребенка, что существенно влияет на комфорт езды.

Большие гелевые колеса с амортизацией и регулируемая ножка для подъема передней части коляски облегчают преодоление небольших препятствий, таких как низкие лестницы или бордюры. Дополнительным преимуществом коляски является современный дизайн.

#### ПОКАЗАНИЯ:

параличи и парезы нижних конечностей различного происхождения, параличи и парезы туловища, ослабление постуральных мышц, отвечающих за поддержание правильного положения тела, чаще всего вызванные такими состояниями, как церебральный паралич или менингеальная грыжа.



## ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ.



**УБИВКА**

*синтетическая*



**РАМА**

*лакированная / глянцевая*



# функции. *безопасности и комфорта*

## ФУНКЦИЯ КОЛЫБЕЛИ

*легкая посадка*



8°-23°

4 позиции

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

*широкий спектр*



16°- 88°

4 позиции

## РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

*быстро и легко*



84°- 173°

6 позиций

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

*подушка сужающая сиденье*



Прогулочная коляска MOUSE оснащена сужающими и смельчающими подушками, которые позволяют снизить внутренние параметры коляски. Благодаря такому решению коляска прослужит вам еще дольше.

## СТАБИЛИЗАЦИЯ

*регулируемые боковины*



Две пары боковин с широким диапазоном регулировок обеспечивают дополнительную стабилизацию ребёнка в коляске.

## ЛЕЖАЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

*возможности регулировок*



Благодаря возможности регулировки угла наклона сиденья, спинки и подножки есть возможность установить коляску в лежачем положении. Благодаря этому короткий сон возможен практически в любом месте и ситуации.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

*по мере необходимости*



Конструкция прогулочной коляски MOUSE позволяет поворачивать сиденье по направлению к движению, благодаря этому здоровье и настроение маленького пассажира будет всегда под контролем.

## КОМПАКТНАЯ РАМА

*легкое складывание*



Конструкция специальной коляски MOUSE позволяет быстро складывать и раскладывать, а небольшие размеры элементов после складывания облегчают транспортировку и хранение.

## ПОДДЕРЖКА ВОЖДЕНИЯ

*комплексная ходовая часть*



Коляска имеет множество функций вождения, таких как блокировка направления на передних колесах, центральный тормоз, амортизация всех колес и регулируемая ножка.


# функциональные аксессуары.



регулируемый капюшон с окном



регулируемые боковины

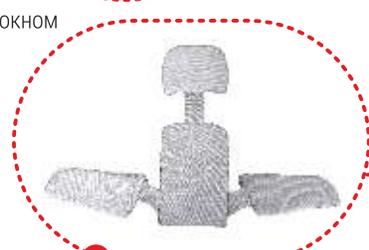

подушка сужающая сиденье



регулируемая  
подставка для ног



удобная система  
крепления колес



блокировка направления



# аксессуары. *большой выбор*



подушка сужающая сиденье



регулируемые боковины



ремни для удержания и стабилизации



клин с регулировкой



барьерка безопасности



терапевтический столик



туристическая сумка



корзина для покупок



зонт



зимние перчатки



спальный мешок



москитная сетка



дождевик

## параметры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

- ширина сиденья 24\* / 32 см
- глубина сиденья 22\* / 26 см
- высота спинки 52 см
- регулировка подножки 14,5-23 см

- вес коляски 17,2-23,2 кг
- длина коляски 95 - 124 см
- высота коляски 122-134 см
- ширина коляски 60 см

Размеры в сложенном виде: рама L 84 x W 58 x H 25 см / сиденье L 72 x W 42 x H 39 см

### ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- высота 80 - 110 см
- максимальный вес 30 кг

\* с суживающей вставкой