



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ /
рекламный предприятие:
MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.

ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

www.mywam.eu



ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, предназначена только для ознакомления и образовательных целей, и поэтому: 1) не является коммерческим предложением согласно коммерческому праву, 2) не может служить основой для принятия решений, касающихся принятия или непринятия лечения, или других медицинских процедур. Интерпретация должна быть произведена врачом специалистом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию.

ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ЭТИКЕТКЕ.

ZEFIR



ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

Специальная коляска ZEFIR это легкое, компактное оборудование, предназначенное для детей ростом от 80 до 140 см и весом до 40 кг.

Его рама изготовлена из алюминиевых и стальных сплавов, благодаря чему коляска очень прочная (для детей весом до 40 кг) и в то же время чрезвычайно легкая.

Легкая конструкция, возможности регулировки и широкий спектр дополнительных аксессуаров делают эту легкую коляску эффективной поддержкой в повседневной жизни.

Система РАСТЕТ С ВАМИ вместе с сужающимися вставками позволяет подогнать габариты коляски под рост ребенка, благодаря чему она прослужит вам долгие годы.

ПОКАЗАНИЯ:

церебральный паралич, менингеальная грыжа, другие условия, затрудняющие самостоятельное передвижение

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания к сидячему положению, Противопоказания к пассивному вертикальному положению



цветовые версии.



ОБИВКА

синтетическая



РАМА

лакированная / глянцевая



ОБИВКА

синтетическая



РАМА

лакированная / матовая



ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ЭТИКЕТКЕ.

функции. *безопасности и комфорта*

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

значение угла



20°

1 позиция

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

изменение угла отклонения



25°, 57°

2 позиции

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

настройки высоты



20, 30, 40 см

3 позиции

Я РАСТУ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ

настройка параметров



Конструкция специальной коляски ZEFIR позволяет подогнать ее размер под рост ребенка. Благодаря простому механизму отстегивания подножки мы можем опустить ее на 40 см ниже уровня сиденья. Сложенный край сиденья позволяет увеличить его поверхность на 6 см, что дает нам максимальную глубину 30 см. Металлические удлинители спинки позволяют увеличить ее на 10 см, что дает нам максимальную высоту 60 см! На максимальных настройках ZEFIR способен безопасно перевозить ребенка ростом до 140 см и весом до 40 кг.

ПОДХОДЯЩИЕ РАЗМЕРЫ

сужающие вставки



Коляска ZEFIR может быть оборудована двумя сужающимися вставками по бокам. Они обеспечивают дополнительную стабильность и комфорт для юных пользователей.

КОМПАКТНАЯ РАМА

легкое складывание



Легкая и компактная конструкция специальной инвалидной коляски ZEFIR позволяет минимизировать его параметры, что облегчает транспортировку и хранение.

ПОДДЕРЖКА ВОЖДЕНИЯ

комплексная ходовая часть



Специальная инвалидная коляска ZEFIR имеет блокировку направления движения на передних колесах, амортизацию на задних колесах и центральный тормоз, установленный на задней балке. В том же месте рядом с ним находится практичная наклонная ножка, которая облегчает подъем передней части коляски при преодолении небольших препятствий, таких как бордюры или невысокие ступени.

функциональные аксессуары.




регулируемый
капюшон с окном



подголовник



пятиточечные ремни

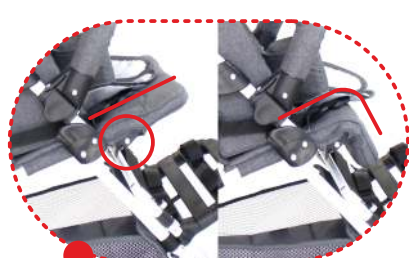

регулировка глубины сиденья



регулируемая
по высоте подставка для ног



корзина покупателя



аксессуары. *большой выбор*



сужающие вставки



подголовник



ремни для удержания
и стабилизации



клин



барьерка безопасности



регулируемый козырек



терапевтический столик




корзина для покупок



туристическая сумка



наклонная ножка

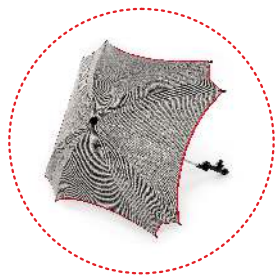

ЗОНТИК



МОСКИТНАЯ СЕТКА




дождевик



спальный мешок



зимние перчатки

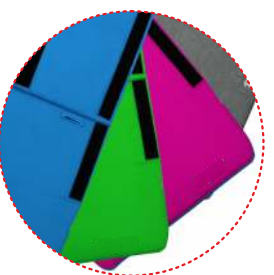

чехлы для коляски

параметры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

-  ширина сиденья 29*/38 см
-  глубина сиденья 24/30 см
-  высота спинки 50/60 см
-  регулировка подножки 20/30/40 см

 Размеры в сложенном виде: L 85 x W 60 x H 31 см

ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

-  высота 80 - 140 см
-  максимальный вес 40 кг

* с сужающими вставками



www.mywam.eu

КОНТАКТ:

RUS / EN

mob. + 48 575 997 180

yuliia@mywam.pl